

NikuTRAX

Handbuch

Notrufarmband NA01 mit SOS und Vitalfunktionen



Version: 02.24

Einleitung

Anleitung zur Vorbereitung und Nutzung Ihrer SIM-Karte mit dem Notrufarmband:

Schritt 1: Überprüfen der SIM-Karten-Voraussetzungen.

Vor dem Einsatz Ihrer SIM-Karte in den Notrufarmband stellen Sie sicher, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt:

- Die SIM-Karte muss im Nano-Format sein. **MultiSIM Karten sind nicht kompatibel!!!** Wir empfehlen Ihnen eine Congstar Wunschmix SIM Karte im D1 Netz.
- Es ist möglich, eine Prepaid-Karte zu verwenden, um den Notrufarmband zu betreiben.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte registriert und freigeschaltet ist.
- Die SIM-Karte muss über ausreichendes Guthaben (€) verfügen.
- Zudem sollte ein kleines Datenvolumen, beispielsweise 250 MB, auf der Karte aktiviert sein.
- Die PIN-Abfrage der SIM-Karte muss zuvor in einem herkömmlichen Handy deaktiviert werden.

Schritt 2: Testen der SIM-Karte im Smartphone

- Starten Sie das Smartphone und stellen Sie sicher, dass keine SIM-PIN-Abfrage erscheint.
- Rufen Sie die Telefonnummer der SIM-Karte im Smartphone an; sie sollte klingeln.
- Versuchen Sie, bei deaktiviertem WLAN, eine Internetadresse aufzurufen (z.B. www.nikutrax.de). Wenn die Seite angezeigt wird, ist die Datenverbindung aktiv.

Schritt 3: Vorbereitung des Notrufarmband

Nachdem Sie die oben genannten Tests erfolgreich durchgeführt haben, ist Ihre SIM-Karte bereit für den Einsatz in dem Notrufarmband:

- Legen Sie die SIM-Karte in den Notrufarmband ein.
- Schalten Sie den Notrufarmband ein, indem Sie die Power-Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt halten.
- Rufen Sie erneut die Nummer der SIM-Karte an; der Notrufarmband sollte klingeln.
- Ihr Notrufarmband ist jetzt mit der SIM-Karte vorbereitet. Scannen Sie später den QR-Code zur Registrierung mit der Aibeile Plus -App von dem Aufkleber der Verpackung.

Download der Aibeile Plus APP

Schritt 4: Verbindung des Notrufarmband mit der Aibeile Plus APP

Um den Notrufarmband mit der Aibeile Plus App auf Ihrem Smartphone zu verbinden, folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Laden Sie die Aibeile Plus App auf Ihr Smartphone herunter. Dies können Sie tun, indem Sie den QR-Code mit Ihrer Kamera oder einem QR-Code-Scanner auf Ihrem Smartphone scannen.
2. Installieren Sie anschließend die Aibeile Plus App auf Ihrem Smartphone.



IOS





Android

Alternativ suchen Sie direkt im Playstore oder APP Store nach der Aibeile Plus APP.



Registrierung der Aibeile Plus APP

Öffnen Sie die Aibeile Plus APP und klicken Sie unten Rechts auf Registrieren. Jetzt können Sie sich registrieren. mit Ihrer E-Mail Adresse registrieren und ein 6-12 stelliges Passwort vergeben.

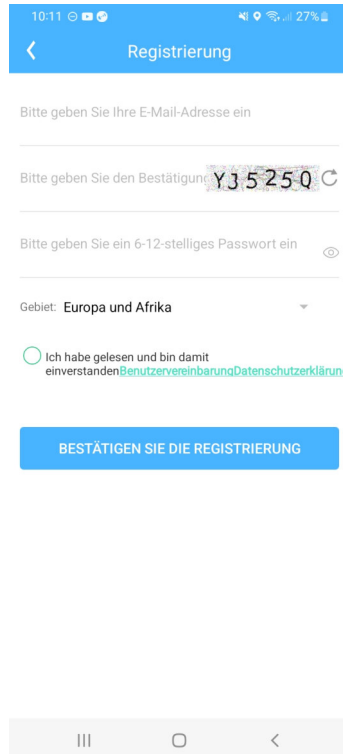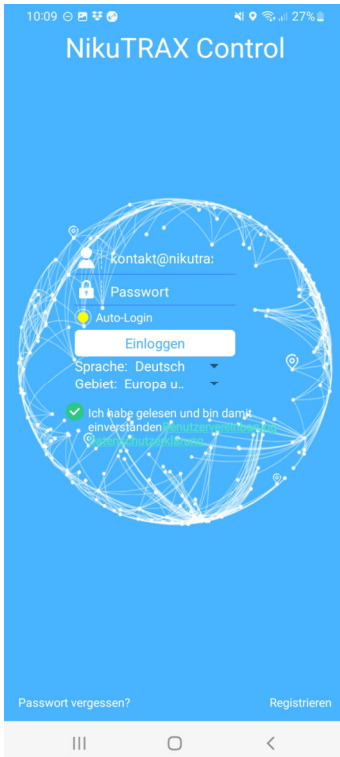

Nachdem Sie sich erfolgreich registriert haben, können Sie sich in die Aibeile Plus APP einloggen. Hierzu geben Sie einfach Ihren Benutzernamen (Ihre E-Mail-Adresse) und Ihr Passwort ein.


Sollten Sie noch keine Geräte in der APP angelegt haben, wird die Anwendung Sie bitten, ein neues Gerät zu binden. Hierfür gehen Sie zu "Gerät hinzufügen" und nutzen den Scanner im Feld "Registercode" auf der rechten Seite, um den QR-Code Ihres Notrufarmband zu scannen. (Alternativ finden Sie die Geräteliste unten in der APP bei dem „Mehr“ Symbol (Dreipunktmenü))

Bindung (Paarung) des Notrufarmbandes mit der Aibeile Plus APP

Nun nehmen Sie die Verpackung des Notrufarmband zur Hand und suchen den QR-Code für die Registrierung des Notrufarmband auf (weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 der Anleitung). Sobald Sie den QR-Code der Verpackung abgescannt haben, wird der Registrierungscode auf dem Bildschirm der APP erscheinen und automatisch in das richtige Feld übernommen.

Als nächstes haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Notrufarmband einen persönlichen Spitznamen zu geben und sich einen Avatar auszusuchen. Sobald Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie alles mit einem Klick auf "OK".

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Notrufarmband sollte nun erfolgreich mit der Aibeile Plus APP verbunden sein und bereit zur Nutzung stehen. Viel Spaß beim Entdecken der vielfältigen Funktionen!

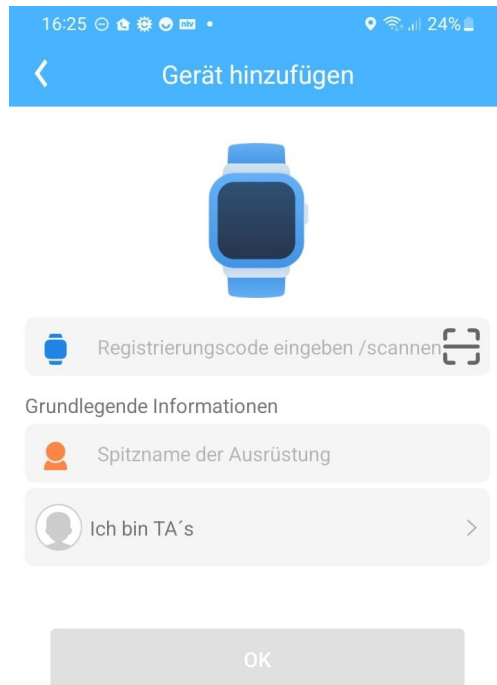

The screenshot shows the 'Gerät hinzufügen' (Add device) screen of the Aibeile Plus APP. At the top, the status bar shows the time 16:25, various icons, and a battery level of 24%. The app header is blue with a back arrow and the text 'Gerät hinzufügen'. Below this is a large image of a blue smartwatch. Under the watch is a light gray box containing a QR code icon, the text 'Registrierungscode eingeben /scannen', and a QR code icon. Below this is the section 'Grundlegende Informationen' (Basic information) with two input fields: 'Spitzname der Ausrüstung' (Nickname of the equipment) and 'Ich bin TA's' (I am a TA's) with a right arrow. At the bottom is a large gray button labeled 'OK'.

Bedienung der APP / Einstellungen des Notrufarmband



Als erstes sollten Sie mit der APP die Zeitzonenauswahl der Uhr des Notrufarmband einstellen.

Gehen Sie dazu in der APP oben rechts auf das Zahnrad und dann unten in den Reiter Zeitzonenauswahl.

MEZ = +01h für die Winterzeit / Und MESZ = +02h für die Sommerzeit

Oder +01h und der Schalter oben auf Sommerzeit setzen.

Danach sollten Sie Ihre SOS Rufnummern anlegen, gehen Sie auf den Reiter SOS Rufnummern und legen diese der Rufreihenfolge nach an.

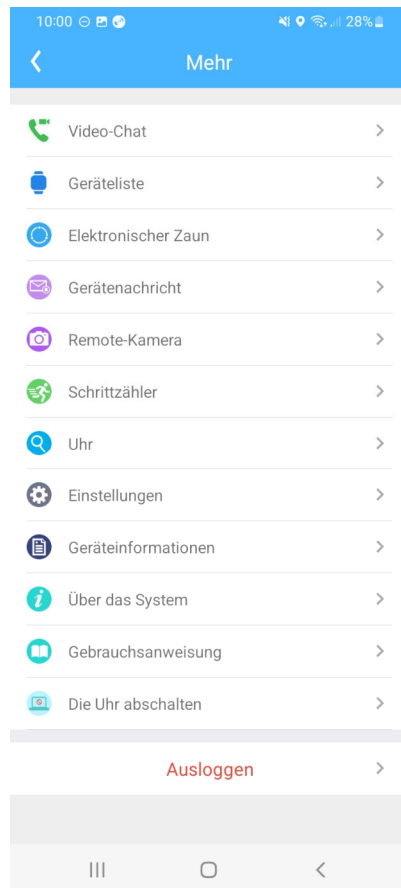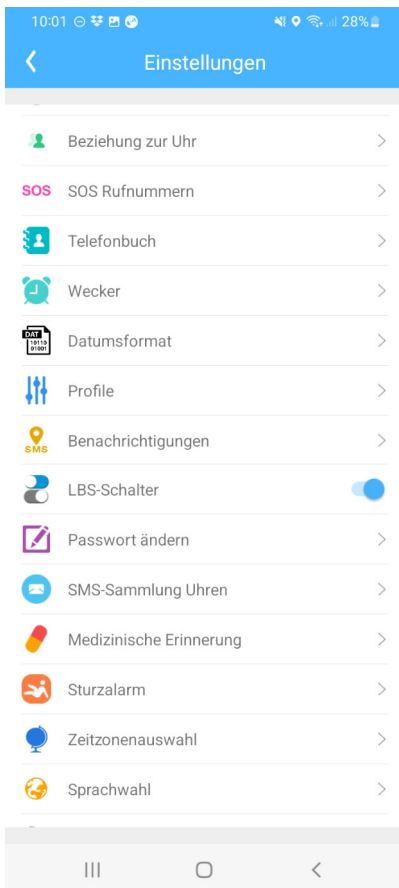

Bedienung des Notrufarmbandes

Um einen SOS-Ruf auszulösen, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

Halten Sie die SOS Taste an dem Notrufarmband länger als 3 Sekunden gedrückt. Die SOS-Funktion wird aktiviert.

Der Notrufarmband wird nun automatisch die erste SOS-Rufnummer wählen. Diese Nummer wurde zuvor in den Einstellungen festgelegt. Diese Nummer sollte eine Person sein, die im Notfall sofort erreichbar ist.

Falls die erste Rufnummer nicht erreicht werden kann, wird der Notrufarmband automatisch die zweite Telefonnummer anwählen, die ebenfalls zuvor in den Einstellungen hinterlegt wurde.

Sollte auch die zweite Rufnummer nicht erreichbar sein, wird der Notrufarmband die dritte Telefonnummer wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Notfallsituation gemeldet wird.

Zusätzliche Funktionen des Notrufarmbands:

Auf dem Display werden Ihnen die Betriebsparameter wie Netzverbindung (4G), Datenverbindung und der Akkustand der Uhr angezeigt.

Durch 2x Drücken der grünen Mikrofon-Taste bekommen Sie die aktuelle Uhrzeit angesagt.

Durch gedrückt halten der grünen Mikrofon-Taste starten Sie die Sprachaufnahme für den Sprachchat.

Ausschalten des Notrufarmbands:

Ohne eingelegte SIM-Karte: Drücken Sie einfach die Power-Taste, um den Notrufarmband auszuschalten. Mit eingelegter SIM-Karte: Navigieren Sie im Menü der APP zu "Ausschalten" und wählen Sie diese Option aus, um den Notrufarmband auszuschalten.

Bitte beachten Sie, dass die SOS-Funktion ein wichtiger Notrufmechanismus ist und sorgfältig eingerichtet werden sollte, um im Notfall effektiv zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Telefonnummern und andere Einstellungen korrekt in dem Notrufarmband oder der dazugehörigen APP festlegen.

Alle weiteren Einstellungen des Notrufarmband sind Modellspezifisch in der APP bei den Reitern beschrieben und erklärt. Sollten Sie dennoch eine Frage zu Ihrem Notrufarmband haben können Sie unseren Support unter der Telefonnummer 05203 / 29 607 28 kontaktieren.

Menüpunkte der APP / Einstellungen des Notrufarmband

Betriebsmodus: Sie können ein Tracking Intervall von 10min., 1 Stunde oder die manuelle Standort Abfrage einstellen. Die Standortabfrage können Sie über den Targeting-Button unten auf der Hauptseite vom Portal auslösen. (Bei einem Intervall von 10 Min. hält der Akku im Betrieb ca. 30 Stunden.)

Beziehung zur Uhr: Hier sehen Sie nur die Einstellungen die Sie bereits bei der Anmeldung vergeben haben.

SOS Rufnummern: Sie können bis zu drei Notfallrufnummern im Format 0049 oder normal national wie gewohnt eintragen.

Telefonbuch: Tragen Sie hier Ihre Kontakt Rufnummern ein die Sie später in der „Weißen Liste“ Freigeben möchten, nur die hinterlegten Nummern können dann das Notrufarmband anrufen.

Wecker: Hier können Sie bis zu drei Weckzeiten für die Uhr einstellen, an der Uhr können Sie nur den Wecker-Alarm quittieren. (Für medizinische Erinnerungen haben Sie noch ein Extra Menü Punkt). Nur bei Uhren der E und S Variante.

Datumsformat: Hier können Sie das Datumsformat der APP einstellen.

Profile: Stellen Sie hier ein ob das Notrufarmband Klingeln und/oder Vibrieren soll.

Benachrichtigungen SMS: Geben Sie hier die Telefonnummer ein die im SOS Alarmfall oder bei Batterie-Alarmen eine Status SMS erhält.

LBS Schalter: Steht für Lokal-Broadcast-Service = Ortung über die Netz-Funktürme!

Den LBS Schalter stellen Sie bitte auf AUS, und verwenden den nur bei Bedarf.

Genauigkeit der Ortung:

GPS Outdoor = 5-10m | WIFI = 800-1000m | LBS = 1000-3000m

Passwort ändern: Hier können Sie das Passwort für die APP neu vergeben.

Körpertemperatur: Hier können Sie die Fernmessung der Temperatur auslösen.

SMS-Sammlung Uhren: Hier sehen Sie die SMS-Nachrichten die von einem Telefon an Ihr Notrufarmband gesendet wurden.

Menüpunkte der APP / Einstellungen des Notrufarmband

Medizinische Erinnerungen: Legen Sie hier medizinische Erinnerungen für die Uhr an. Sie können sogar eine Ansage mit einer persönlichen Sprachnachricht hinterlegen.

Sturzalarm: An der Stelle können Sie den Sturzalarm aktivieren. Setzen Sie dafür den oberen Schalter APP Erinnerung auf EIN. Wenn Sie auch die Anwahl für eine Sprechverbindung wünschen, stellen Sie auch den unteren Schalter auf EIN.

Wählen Sie jetzt die noch die Sensitivität mit der die Sturzerkennung Meldungen absetzt. Ein kleiner Wert = hochempfindlich / ein hoher Wert = weniger Empfindlichkeit bei Stürzen.

Zeitzonenauswahl: Wählen Sie Hier die Zeitzone für die Uhr aus um die Uhr richtig einzustellen. Wählen Sie +1 MEZ und stellen Sie den Schalter Sommerzeit dem entsprechend auf AUS oder EIN.

Sprachwahl: Wählen Sie die Sprache des Armbandes für die Zeitansage aus.

Einstellung Umschalten: Hier können Sie einstellen ob das Notrufarmband eingehende Anrufe nach dem Klingeln automatisch an nimmt.

Weiße Liste / Sperrnummern: Hier können Sie die Anrufe die die Uhr erreichen sollen begrenzen bzw. einzelne Telefonnummern sperren.

Remote-Neustart: Die Uhr startet neu! Alle Daten bleiben erhalten!

Gerät zurücksetzen: Gerät geht in den Auslieferungszustand!

Persönliche Daten: Hier stehen nur Ihre Kontaktdaten der APP.

Konto Logout: Sie melden sich von der APP ab und müssen sich mit Ihren Zugangsdaten neu einloggen.

Hinweis >> Sie können die APP auf mehreren Telefonen gleichzeitig verwenden! Dafür müssen Sie den QR-Code zur Registrierung mit einem weiteren Telefon welches die Aibeile APP installiert hat scannen. Danach erscheint die Meldung dass die Uhr bereits gebunden ist, und der Nutzer der ersten APP bekommt eine Aufforderung zur Freischaltung.

Menüpunkte der APP / Einstellungen des Notrufarmband (Mehr)

Geräteliste: Ist eine Liste mit den Geräten die an Ihrer APP angemeldet sind.

Hier können Sie weitere Geräte (Uhren) hinzufügen oder entfernen.

Elektronischer-Zaun: Mit dem Geo-Zaun können Sie einen Bereich festlegen, um Alarme beim verlassen oder bei dem Betreten des Geo-Bereichs zu erhalten.

Drücken Sie unten auf das Plus Symbol und wählen Sie den Bereich in der Landkarte aus.

Gerätenachricht: Auf diesen Menü Punkt gelangen Sie auch über das Brief Symbol oben links in der APP! Dort sind alle Alarmmeldungen z.B. SOS, Stürze, Geo-Alarme und Batteriealarme die von der Uhr übermittelt wurden hinterlegt und gespeichert.

Schrittzähler: Hinter diesem Menüpunkt finden Sie sämtliche Vitalfunktionen!

Bitte geben Sie zuerst Ihre Schrittlänge und das Gewicht ein und stellen Sie den Schalter auf EIN. Jetzt ist Ihr Schrittzähler auch an der Uhr aktiv und kann durch wischen nach oben auf dem Display angezeigt werden.

Des weiteren bekommen Sie in diesem Menüpunkt auch Ihren Kalorienverbrauch, den Schlafrhythmus und die zurückgelegte Strecke in Metern angezeigt.


Uhr: Mit dieser Funktion können Sie Ihre Uhr durch Klingeln leichter Auffinden, falls die Uhr verlegt wurde.

Einstellungen: Sie gelangen zurück in das Hauptmenu Einstellungen! (Siehe Seite 8)

Menüpunkte der APP / Blutdruck und Herzfrequenz

Nur bei den S Versionen und NA01

Bei dem Menüpunkt Schrittzähler in der APP finden Sie ganz unten in „Rot“ die Blutdruckmessung und können diese von dort starten. Im Menüpunkt der Uhr können Sie die Messungen ebenfalls starten, die Werte Blutdruck und Herzfrequenz werden im Kalender der APP gespeichert.

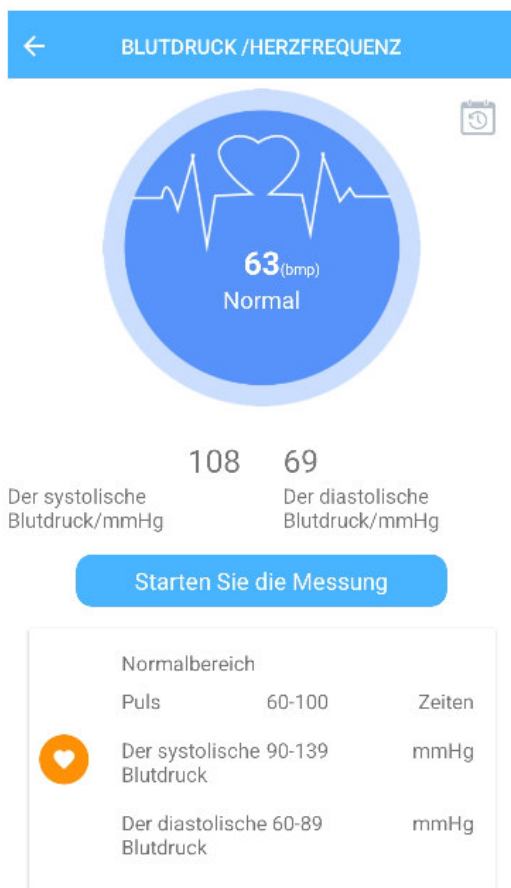

Reinigung und Pflege

Wischen Sie das Notrufarmband regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie kein scharfes Reinigungsmittel oder Chemikalien, um Beschädigungen zu vermeiden. Bitte tragen Sie den Notrufarmband nicht beim Schwimmen, Duschen oder anderen Wasseraktivitäten. Obwohl der Notrufarmband wasserabweisend ist, ist er nicht für den Einsatz unter Wasser konzipiert.

Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb und Verwendung des Systems können von uns nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen.

Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Achtung: Öffnen des Gerätes, Manipulations- und Reparaturversuche, sowie nicht bestimmungsgemäßer Betrieb führen zu Gewährleistungsverlust.

Verfasser & Copyright ©

NikuTRAX

Im Hülsen 13
33739 Bielefeld

E-Mail: kontakt@nikutrax.de

Web: www.nikutrax.de

Shop: shop.nikutrax.de

Portal: nikutrax.com

Tel: 05203 / 29 607 28

Fax: 05203 / 29 607 29